

# Canllaw i Arbedwyr Ocsigen Ecolite 4000



# Cynnwys

Sut i Gysylltu Arbedwr **3**

Gosod Eich Cyflenwad Ocsigen **4**

Diffodd y Cyflenwad Ocsigen **5**

Gwirio Pŵer Batri Eich Arbedwr **5**

Newid y Batris **6**

Cyfnodau Parhau Silindrau Wrth Ddefnyddio Arbedwr **7**

Datrys Problemau **8**



**GWELLA  
BYWYDAU**

# Sut i Gysylltu Arbedwr



1

Rhowch y silindr yn y bag a ddarparwyd



2

Rhowch yr arbedwr yn y boced



3

Cysylltwch y teclyn lleihau llif ar y tiwb troellog â chysylltydd allfa'r silindr



4

Sicrhewch y cysylltiad gyda'r clamp tiwb



5

Cysylltwch ben y tiwb troellog â'r cysylltydd silindr ar yr arbedwr



6

Cysylltwch y tiwbiau trwyn fforchog â'r cysylltiad ar ochr yr arbedwr

## Rhybudd

Nid yw arbedwyr yn addas ar gyfer cleifion dan saith oed.

Peidiwch â'i ddefnyddio tra byddwch yn cysgu. Peidiwch â byrhau eich tiwbiau.

Dim ond pan fyddwch yn gwisgo tiwbiau trwyn fforchog y dylech ddefnyddio arbedwr. Ni fydd arbedwyr yn gweithio gyda mygydau.

(ar gael 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer galwadau brys)

# Gosod Eich Cyflenwad Ocsigen



Rhowch y tiwbiau trwyn fforchog amdanoch



Trowch yr arbedwr ymlaen drwy wasgu'r botwm on/off unwaith



Gan ddefnyddio'r botymau **-** **+**, dewiswch y gosodiad yn unol â chyfarwyddyd eich Gweithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol



Trowch falf ochr y silindr i on/+, os oes un yno



Trowch y silindr ocsigen i raddfa llif o 4 litr y funud (lpm)



Dechreuwch anadlu drwy'r tiwbiau trwyn fforchog

## Rhybudd

Cofiwch fod rhaid i'r silindr fod wedi'i osod ar gyfradd llif o 4 lpm a'r arbedwr wedi'i osod ar y gosodiad a gyfarwyddwyd

# Diffodd y Cyflenwad Ocsigen

1. Trowch y falf on/off ar y silindr yn araf i gyfeiriad y cloc i'r safle off
2. Daliwch i anadlu drwy'r tiwbiau trwyn fforchog nes byddwch chi'n teimlo nad oes rhagor o ocsigen yn dod trwodd (mae hyn yn lleihau'r gwasgedd yn y tiwbiau)
3. Tynnwch y tiwbiau trwyn fforchog i ffwrdd
4. Diffoddwch yr arbedwr

## Rhybudd

Os yw'r silindr yn cael ei ddefnyddio heb yr arbedwr, cofiwch ei osod yn ôl i'r raddfa llif a ragnodwyd bob tro

# Gwirio Pŵer Batri Eich Arbedwr

Gwasgwch y botwm on/off a gwiriwch ddangosydd y batri a ddangosir.

Dylai batri'r arbedwr bara mwy na phedair wythnos. Gwiriwch lefel pŵer y batri bob tro cyn defnyddio eich arbedwr.



Cadwch fatris sbâr gyda chi bob amser. Os yw dangosydd y batri yn dangos lefel isel, meddyliwch am newid y batris cyn gadael cartref. Bydd yr arbedwr yn cael ei ddarparu gyda batris, eich cyfrifoldeb chi yw eu newid nhw.

# Newid y Batris

Mae angen dau fatri AA ar yr arbedwr.


I newid y batri:

1. Gwnewch yn siŵr fod y ddyfais wedi'i diffodd
2. Tynnwch glawr y batris
3. Gwaredwch y batris sydd yno yn ddiogel
4. Rhowch fatri newydd i mewn yn unol â'r cyfarwyddyd yn y diagram ar y ddyfais.
5. Ar ôl i chi newid y batris, gwiriwch lefel y pŵer

## Rhybudd

Defnyddiwch fatri alcaliaidd yn unig gydag arbedwr.

Nodwch: Mae eich arbedwr ocsigen yn parhau yn eiddo i Baywater Healthcare ac mae ar fenthyg i'r GIG

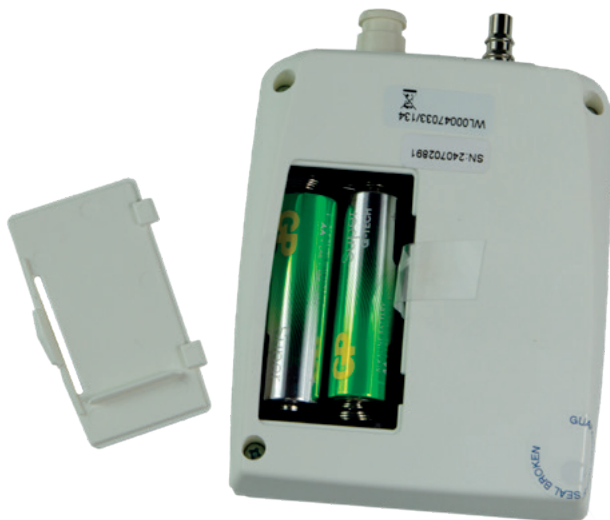

# Cyfnodau Parhau Silindrau Wrth Ddefnyddio Arbedwr

## Cyfnodau parhau silindr Freedom\* 400

| Gosodiad | Cyfnod parhau bras gydag arbedwr |
|----------|----------------------------------|
| 1        | 32 awr 10 munud                  |
| 2        | 17 awr 40 munud                  |
| 3        | 11 awr                           |
| 4        | 8 awr 10 munud                   |
| 5        | 6 awr 30 munud                   |
| 6        | 5 awr 25 munud                   |
| 7        | 4 awr 40 munud                   |
| 8        | 4 awr 5 munud                    |

## Cyfnodau parhau silindr Freedom\* 300

| Gosodiad | Cyfnod parhau bras gydag arbedwr |
|----------|----------------------------------|
| 1        | 23 awr 5 munud                   |
| 2        | 12 awr 40 munud                  |
| 3        | 7 awr 55 munud                   |
| 4        | 5 awr 50 munud                   |
| 5        | 4 awr 40 munud                   |
| 6        | 3 awr 50 munud                   |
| 7        | 3 awr 20 munud                   |
| 8        | 2 awr 55 munud                   |

Gall cyfnodau parhau silindrau wrth ddefnyddio arbedwr newid yn ddibynnol ar raddfa anadlu a gweithgarwch y claf.

(ar gael 24 awr, 7 diwrnod yr wythnos ar gyfer galwadau brys)



## Datrys Problemau

Wrth anadlu i mewn gan ddefnyddio arbedwr, dylech chi glywed sŵn hisian. Os nad yw'r sŵn hwn i'w glywed, neu os nad oes ocsigen i'w deimlo'n dod o'r arbedwr:

- Gwiriwch fod yr arbedwr wedi'i droi ymlaen ar y gosodiad llif cywir a bod y silindr wedi'i droi i 4 lpm
- Gwiriwch fod yr holl diwbiau wedi'u cysylltu'n gywir a bod pŵer yn y batri

Os ydych chi'n dal i fethu â chlywed sŵn hisian neu'n teimlo nad oes ocsigen yn dod o'r arbedwr, tynnwch yr arbedwr a chysylltwch y tiwbiau trwyn fforchog yn uniongyrchol â'r silindr. Dylid gosod y silindr ar gyfradd llif yn unol â chyfarwyddyd eich Gweithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol. Ffoniwch Baywater Healthcare.

## Cyflenwad ocsigen isel

| Sgrin arddangos | Larwm clywadwy       | Cam gweithredu                                                                                           |
|-----------------|----------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| No 02           | Oes, ar ôl pob anadl | Gwiriwch y tiwbiau troellog rhag rhwystrau a phlygiadau<br><br>Gwiriwch bod digon o ocsigen yn y silindr |

## Monitro impylsau anadlu

| Sgrin arddangos                  | Larwm clywadwy                                  | Cam gweithredu                                                |
|----------------------------------|-------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------|
| CHECK<br>CANNULA NO<br>BREATHING | Larwm am 30 eiliad yna mae'r arbedwr yn diffodd | Gwiriwch y tiwbiau trwyn fforchog rhag rhwystrau a phlygiadau |

## Monitro'r batris

| Sgrin arddangos   | Larwm clywadwy | Gweithred          |
|-------------------|----------------|--------------------|
| CHANGE<br>BATTERY | Oes            | Newidiwch y batris |

Os nad yw'r camau hyn yn datrys eich problem, tynnwch yr arbedwr, cysylltwch eich tiwbiau trwyn fforchog yn uniongyrchol â'r silindr a'i ddefnyddio ar y gyfradd llif a gyfarwyddwyd gan eich Gweithiwr Gofal Iechyd Proffesiynol. Ffoniwch Baywater Healthcare i gael cyngor.

[illegible]

# Nodiadau

This image shows a blank sheet of white paper with horizontal blue lines. The lines are evenly spaced and run across the width of the page, providing a guide for writing. There are no margins, text, or other markings on the paper.



I gael rhagor o wybodaeth cysylltwch â:

**Baywater Healthcare**

Wulvern House  
Electra Way  
Crewe  
Cheshire  
CW1 6GW

Ffoniwch: 0800 373580

✉ [healthuk@baywater.co.uk](mailto:healthuk@baywater.co.uk)

🐦 @BaywaterHealth

📘 Baywater Healthcare

🌐 Baywater Healthcare

